


PD-PR-027 Issue 1.0
OG300 User Instructions

ENGLISH

Oragene® DNA Self-Collection Kit User Instructions

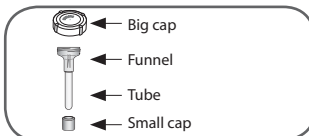

Instructions:

Do not eat, drink, smoke or chew gum for 30 minutes before giving your saliva sample.

- Spit until the amount of liquid saliva (not bubbles) reaches the level shown in picture #1.
- Hold container upright.
Close funnel with big cap.
When closed, liquid in the big cap will be released to mix with saliva.
- Hold container upright.
Unscrew funnel from tube (by twisting counter-clockwise).
- Close tube with small cap.
- Mix 5 times
Throw out funnel and big cap.

User Tips:

- Do NOT remove plastic film from the big cap.
- To make more saliva, close your mouth and wiggle your tongue or rub your cheeks.
- Some people may find it hard to spit so much saliva. It is easier to spit more if you place ¼ tsp of plain white sugar on your tongue.
- Finish spitting within 30 minutes.

Intended Use: This product is designed for the safe collection of DNA samples through human saliva.

Contents: Each collection vial contains 2ml of Oragene liquid. Before use, the solution in the cap should be clear and colorless.

Warnings: Wash with water if the Oragene liquid comes in contact with eyes or skin. Do not ingest.

Storage: Store at room temperature 15-30 °C (59-86 °F).

Label Legend:

Consult package insert

In Vitro Medical Device


CE Marking

Caution: Small cap, Choking hazard

Collect saliva by

FRANÇAIS

Trousse d'autoprélèvement d'ADN Oragene®

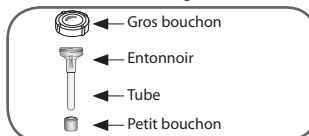

Instructions:

Il est demandé de ne pas manger, boire, fumer ou mâcher du chewing-gum pendant les 30 minutes qui précèdent le prélèvement de l'échantillon.

- Saliver jusqu'à ce que le liquide (sans broue) atteigne le niveau indiqué sur la photo n° 1.
- Tenir le contenant en position verticale.
Fermer l'entonnoir avec le gros bouchon.
Une fois l'entonnoir fermé, le liquide contenu dans le gros bouchon se mélangera avec la salive.
- Tenir le contenant en position verticale.
Dévisser l'entonnoir du tube (en le faisant tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre).
- Fermer le tube avec le petit bouchon.
- Mélanger 5 fois.
Jeter l'entonnoir et le gros bouchon.

Conseils pour l'utilisation :

- Ne PAS enlever la pellicule plastique du gros bouchon.
- Pour produire plus de salive, remuer la langue ou passez-la sur les parois internes de vos joues, la bouche fermée.
- Certaines personnes peuvent trouver difficile de saliver autant. Si c'est votre cas, il suffit de déposer ¼ de cuillère à thé de sucre blanc sur votre langue.
- Terminer le prélèvement dans un délai de 30 minutes.

Utilisation du produit: Ce produit a été conçu pour la collecte sécuritaire d'échantillons d'ADN au moyen de la salive.

Contenu: Chaque flacon de prélèvement renferme 2 mL de solution Oragene. Celle-ci doit être claire et incolore avant l'utilisation.

Avertissement: Ne pas ingérer. Si la solution Oragene vient en contact avec les yeux ou la peau, rincer avec de l'eau.

Entreposage: Conserver le contenant à température ambiante, soit entre 15 et 30 °C (59-86 °F).

Légende de l'étiquette:

Consulter l'information à l'intérieur

Produit médical in vitro


Marque CE

Mise en garde : Le petit bouchon pose un risque de suffocation.

Collecter la salive avant

ESPAÑOL

Kit de recolección de ADN Oragene® Instrucciones para el usuario

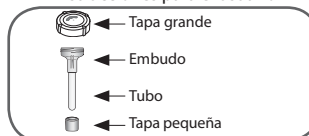

Instrucciones:

No coma, beba, fume ni mastique goma de mascar en los 30 minutos previos a entregar su muestra de saliva.

- Llene el recipiente con saliva líquida (sin contar la espuma) hasta alcanzar el límite que aparece en la figura número 1.
- Mantenga el recipiente en posición vertical.
Cierre el embudo con la tapa grande.
Cuando lo cierre, el líquido de la tapa grande se mezclará con la saliva.
- Mantenga el recipiente en posición vertical.
Desenrosque el embudo para separarlo del tubo (en dirección contraria a las agujas del reloj).
- Cierre el tubo con la tapa pequeña.
- Mezcle 5 veces.
Deseche el embudo y la tapa grande.

Sugerencias para el usuario:

- NO quite la película de plástico de la tapa grande.
- Para generar más saliva, cierre la boca y mueva la lengua o frótese las mejillas.
- A algunas personas les resulta difícil juntar tanta saliva. Para juntar más saliva coloque ¼ de cucharadita de azúcar blanca común sobre la lengua.
- Termine de recolectar la muestra dentro de los 30 minutos.

Uso específico: Este producto está diseñado para la recolección segura de muestras de ADN mediante saliva humana.

Contenido: Cada frasco contiene 2ml de líquido Oragene. Antes de utilizarla, la solución en la tapa debería ser transparente e incolora.

Advertencia: No lo ingiera. Si el líquido Oragene entra en contacto con los ojos o la piel, lave con agua.

Conservación: Conserve a temperatura ambiente entre 15-30 °C (59-86 °F).

Leyenda de la etiqueta

Lea las instrucciones del paquete

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro


Marca CE

Advertencia: La tapa pequeña presenta peligro de asfixia.

Para recolectar saliva

DEUTSCH

Oragene® DNA-Selbstentnahme-Set Gebrauchsanweisung

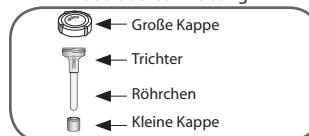

Gebrauchsanweisung:

Stellen Sie 30 Minuten vor Entnahme der Speichelprobe Essen, Trinken, Rauchen und Kaugummikauen ein.

- Geben Sie so viel Speichel ab, dass die Menge an flüssigem Speichel (nicht Schaum) den in Abb.1 angegebenen Füllstand erreicht.
- Halten Sie den Behälter aufrecht.
Verschließen Sie den Trichter mit der großen Kappe.
Nach Verschließen des Trichters wird Flüssigkeit aus der großen Kappe freigesetzt und vermischt sich mit dem Speichel.
- Halten Sie den Behälter aufrecht.
Schrauben Sie den Trichter (im Gegenzeigersinn) vom Röhrchen ab.
- Verschließen Sie das Röhrchen mit der kleinen Kappe.
- Mischen Sie den Inhalt des Röhrchens durch 5-maliges Umdrehen.
Entsorgen Sie den Trichter und die große Kappe.

Gebrauchshinweise:

- Entfernen Sie NICHT die Kunststoffolie von der großen Kappe.
- Um mehr Speichel zu erzeugen, wackeln Sie bei geschlossenem Mund mit der Zunge oder reiben Sie Ihre Backen.
- Einigen Menschen fällt die Abgabe großer Speichelmenngen schwer. Die Speichelabgabe wird erleichtert, wenn Sie ¼ Teelöffel reinen weißen Zucker auf Ihre Zunge geben.
- Die Speichelabgabe sollte innerhalb von 30 Min. abgeschlossen sein.

Verwendungszweck: Das Produkt dient zur sicheren Entnahme von DNA-Proben mittels Humanspeichel.

Inhalt: Jeder Entnahmebehälter enthält 2 ml Oragene-Flüssigkeit. Vor Verwendung muss die Lösung im Behälter klar und farblos sein.

Warnung: Flüssigkeit nicht einnehmen. Wenn die Oragene-Flüssigkeit mit Augen oder Haut in Berührung kommt, mit Wasser spülen.

Lagerung: Bei Raumtemperatur (15-30 °C) lagern.

Legende des Etiketts

Sie Verpackungsbilge beachten

In-vitro-Diagnostikum


CE-Kennzeichnung

Vorsicht: Kleine Kappe: Erstickungsgefahr!

Speichelentnahme bis

NEDERLANDS

Oragene® DNA Eigen-Verzamel Kit Gebruiksaanwijzing

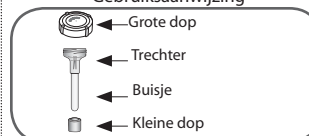

Gebruiksaanwijzing:

U mag in het halfuur voordat u uw speekselmonster afstaat niet eten, drinken of roken en geen kauwgom kauwen.

- Blijf spugen tot de hoeveelheid vloeibaar speeksel (schuim telt niet) het niveau bereikt dat in afbeelding 1 is aangegeven.
- Houd het buisje rechtop.
Sluit de trechter af met de grote dop.
Zodra de grote dop is bevestigd, mengt het speeksel zich met de vloeistof in de dop.
- Houd het buisje rechtop.
Schroef de trechter los van het buisje (draai de trechter linksom).
- Sluit het buisje af met de kleine dop.
- Schud het buisje vijf keer.
Gooi de trechter en de grote dop weg.

Tips voor de gebruiker:

- Verwijder de plastic tape van de grote dop NIET.
- Maak meer speeksel door met uw mond gesloten uw tong te bewegen of over uw wangen te wrijven.
- Sommige mensen vinden het moeilijk om zoveel speeksel te spugen. Het is gemakkelijker om meer te spugen als u ¼ theelepelt witte suiker op uw tong legt.
- Het spugen moet binnen 30 minuten klaar zijn.

Bestemming: Dit artikel is ontworpen voor het veilig verzamelen van DNA-monsters via menselijk speeksel.

Inhoud: Elk verzamelbuisje bevat 2 ml Oragene-vloeistof. De vloeistof in de dop moet vóór gebruik helder en kleurloos zijn.

Waarschuwing: Slik de vloeistof niet door. Spoel uw ogen of huid met water indien ze in contact komen met de Oragene-vloeistof.

Bewaren: Bewaar op kamertemperatuur, 15 - 30 °C.

Uitleg van etiket

Zie verpakkingsbijsluiters

In Vitro medisch hulpmiddel


CE-merk

Let op: Verstikkingsgevaar - slik de kleine dop niet in

Verzamel speeksel voor

SVENSKA

Oragene® Personligt uppsamlings-kit för DNA. Användarinstruktioner

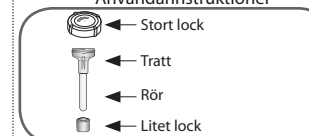

Instruktioner:

Du bör inte äta, dricka, röka eller tugga tuggummi 30 minuter innan du lämnar ditt salivprov.

- Spotta tills mängden saliv (inte skum) når upp till nivån som visas på bild 1.
- Håll behållaren upprätt.
Stäng tratten med det stora locket.
När det stängts blandas vätska från det stora locket med saliven.
- Håll behållaren upprätt.
Skruva av tratten från röret (genom att vrida motsols).
- Stäng röret med det lilla orange locket.
- Skaka fem gånger.
Kasta tratten och det stora locket.

Tips:

- Ta INTE bort plastfilmen från det stora locket.
- För att kunna utsöndra mer saliv rör du tungan fram och tillbaka eller gnuggar kinderna med stängd mun.
- Vissa personer kan ha svårt med att få fram så mycket saliv. Det blir lättare att spotta om du placerar ¼ tsk vanligt vitt socker på tungan.
- Sluta spotta inom 30 minuter.

Avsedd användning: Den här produkten är utformad för att på ett säkert sätt samla in DNA-prov genom humant saliv.

Innehåll: Varje provampull innehåller 2 ml Oragene-vätska. Innan du börjar ska lösningen vara klar och färglös.

Varningar: Svälj inte. Tvätta med vatten om Oragene-vätskan kommer i kontakt med ögon eller hud.

Förvaring: Förvara i rumtemperatur vid 15-30 °C.

Förklaring av etikett

Se bruksanvisning i förpackningen


Medicinsk enhet för in vitro-användning

CE-märkning


Varning! Det lilla locket kan utgöra en kvävningrisk

Samla in saliv före


1

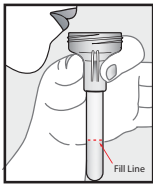


2

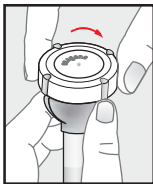


3

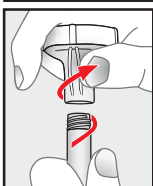

4

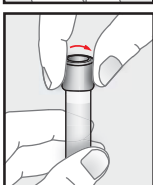


5

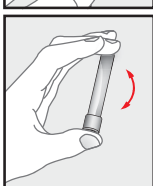

PD-PR-Q27 Issue 1.0
OG300 User Instructions

ENGLISH

Oragene® DNA Self-Collection Kit
User Instructions

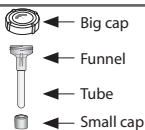

Instructions:

Do not eat, drink, smoke or chew gum for 30 minutes before giving your saliva sample.

- 1 Spit until the amount of liquid saliva (not bubbles) reaches the level shown in picture #1.
- 2 Hold container upright. Close funnel with big cap. When closed, liquid in the big cap will be released to mix with saliva.
- 3 Hold container upright. Unscrew funnel from tube (by twisting counter-clockwise).
- 4 Close tube with small cap.
- 5 Mix 5 times. Throw out funnel and big cap.

User Tips:

- Do NOT remove plastic film from the big cap.
- To make more saliva, close your mouth and wiggle your tongue or rub your cheeks.
- Some people may find it hard to spit so much saliva. It is easier to spit more if you place ¼ tsp of plain white sugar on your tongue.
- Finish spitting within 30 minutes.

Intended Use: This product is designed for the safe collection of DNA samples through human saliva.

Contents: Each collection vial contains 2ml of Oragene liquid. Before use, the solution in the cap should be clear and colorless.

Warnings: Wash with water if the Oragene liquid comes in contact with eyes or skin. Do not ingest.

Storage: Store at room temperature 15-30 °C (59-86 °F).

Label Legend:

Consult package insert

In Vitro Medical Device

CE Marking

Caution: Small cap, Choking hazard

Collect saliva by

SUOMI

Oragene® DNA:n keräysastia
Käyttöohje



Ohjeet:

Älä syö, juo, polta tupakkaa tai pure purukumia 30 minuuttia ennen sylkinäytteen antamista.

- 1 Sylje niin paljon, että sylkinesteen (vaahtoa ei lasketa) pinta on kuvassa 1 näkyvällä tasolla.
- 2 Pidä purkkia ylösalaisin. Sulje suppilo suurella kannella. Kun suppilo on suljettu, suuressa kannessa oleva neste sekoittuu sylkeeseen.
- 3 Pidä purkkia ylösalaisin. Ruuvaa suppilo irti putkesta (kääntämällä vastapäivään).
- 4 Sulje putki pienellä kannella.
- 5 Sekoita viisi kertaa. Hävitä suppilo ja suuri kansi.

Vinkkejä:

- ÄLÄ irrota suuren kannen muovikalvoa
- Voit lisätä syljen eritystä pitämällä suuta kiinni ja liikuttamalla kieltä tai hieromalla poskia.
- Näytettä varten tarvittavan määrän sylkeminen voi olla vaikeaa. Voit lisätä syljen eritystä asettamalla kielen päälle ¼ tl tavallista hienoa sokeria.
- Sylje korkeintaan 30 minuuttia.

Käyttötarkoitus: astia on tarkoitettu DNA-näytteiden luotettavaan keräämiseen ihmisen syljestä.

Sisältö: Keräysastiassa on 2 ml Oragene-nestettä. Ennen käyttöä keräysastiassa olevan liuoksen on oltava kirkasta ja väritöntä.

Varoitukset: Ei saa niellä. Jos Oragene-nestettä joutuu iholle tai silmiin, huuhtele alue huolellisesti vedellä.

Säilytys: säilytys huonelämpötilassa 15 - 30 °C.

Merkkien selitykset

Lue pakkaukseloste

Tarkoitettu lääketieteelliseen in vitro -käyttöön


CE-merkki

Varoitukset: Pieni kansi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Kerää sylkinäyte viim.

DANSK

Oragene® DNA Self-Collection Kit
Brugsanvisning

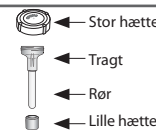

Instruktioner:

Du må ikke spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi 30 minutter, før du afgiver din spyttprøve.

- 1 Spyt indtil mængden af flydende spytt (ikke skum) når det niveau, der vises på billede nr. 1.
- 2 Hold beholderen oprejst. Luk tragten med den store hætte. Når den lukkes, blandes væsken i den store hætte med spyttet.
- 3 Hold beholderen oprejst. Skru tragten af røret (ved at dreje mod uret).
- 4 Luk røret med den lille hætte.
- 5 Bland 5 gange. Smid tragten og den store hætte ud.

Brugertips:

- Fjern IKKE plastfilmen fra den store hætte.
- For at danne mere spytt kan du bevæge tungen (med munden lukket) eller gnide dig på kinderne.
- Nogle kan have svært ved at producere så meget spytt. Det er lettere at producere spytt, hvis du lægger ¼ tsk sukker på tungen.
- Du skal være færdig med at spytte inden for 30 minutter.

Tilsligtet anvendelse: Dette produkt er beregnet til sikker indsamling af DNA-prøver via humant spytt.

Indhold: Hver opsamlingsbeholder indeholder 2 ml Oragene-væske. Før brug skal opløsningen være klar og farveløs.

Advarsler: Må ikke indtages. Skyl med vand, hvis du får Oragene-væske på huden eller i øjnene.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur 15-30 °C.

Etikettekst

Se indlægsseddel

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik


CE-merke

Advarsel: Der kan opstå kvælningfare, hvis den hætte sluges

Saml spytt senest

ITALIANO

Kit di autoraccolta Oragene® per il test del DNA
Istruzioni per l'uso

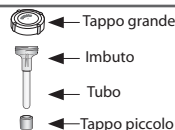

Istruzioni:

Non mangiare, bere, fumare o masticare chewing gum per 30 minuti prima della raccolta del campione di saliva.

- 1 Continuare a produrre saliva liquida (non schiumosa) fino a raggiungere il livello indicato nella figura n.1.
- 2 Tenere il contenitore in posizione verticale. Chiudere l'imbuto con il tappo grande. A questo punto, il liquido contenuto nel tappo viene rilasciato per miscelarsi alla saliva.
- 3 Tenere il contenitore in posizione verticale. Svitare l'imbuto dal tubo (ruotandolo in senso antiorario).
- 4 Chiudere il tubo con il tappo piccolo.
- 5 Agitare il tubo 5 volte. Rimuovere l'imbuto e il tappo grande.

Consigli per l'uso:

- NON rimuovere la pellicola di plastica dal tappo grande.
- Con la bocca chiusa, muovere la lingua in modo da produrre più saliva.
- In caso di scarsa produzione di saliva, porre ¼ di cucchiaino di zucchero sulla lingua.
- Completare la raccolta del campione entro 30 minuti.

Indicazioni: questo prodotto è stato ideato per la raccolta sicura di campioni di DNA attraverso la saliva umana.

Contenuto: ciascun contenitore di raccolta contiene 2 ml di liquido Oragene. Prima dell'uso, la soluzione nel tappo deve presentarsi limpida e incolore.

Attenzione: non ingerire. In caso di contatto del liquido Oragene con gli occhi e la pelle, lavare immediatamente con acqua.

Conservazione: conservare a una temperatura ambiente di 15-30 °C (59-86 °F).

Legenda

Consultare le istruzioni all'interno della confezione

Dispositivo medico-diagnostico in vitro


Marca CE

Attenzione: il tappo piccolo può causare soffocamento se ingerito

Raccogliere la saliva con

NORSK

Oragene® DNA-prøvetakingssett
Brukerveiledning

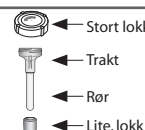

Instruksjoner:

Ikke spis, drikk, røyk eller tygg tyggegummi de siste 30 minuttene før du avgir spyttprøven.

- 1 Fortsett å samle opp spytt til mengden flytende spytt (ikke skum) når opp til nivået som er vist på bilde 1.
- 2 Hold beholderen loddrett. Lukk trakten med det store, lokket. Når den er lukket, blir væsken i det lokket frigjort, slik at den kan blande seg med spyttet.
- 3 Hold beholderen loddrett. Skru trakten løs fra røret (vri den mot klokken).
- 4 Lukk røret med det lille, lokket.
- 5 Bland fem ganger. Kast trakten og det store, lokket.

Brukertips:

- IKKE fjern plastfilmen fra det store lokket.
- Hvis du trenger å produsere mer spytt, kan du bevege på tungen eller gni på kinnene med munnen lukket.
- Noen synes det kan være vanskelig å avgir mye spytt. Det blir lettere å produsere nok spytt hvis du legger ¼ ts hvitt sukker på tungen.
- Spyttprøven må tas på 30 minutter.

Bruksområde: Dette produktet skal brukes til å ta sikre DNA-prøver ved hjelp av spytt fra mennesker.

Innhold: Hvert prøveglass inneholder 2 ml Oragene-væske. Før bruk skal løsningen være klar og fargeløs.

Advarsler: Må ikke svelges. Skyll med vann hvis Oragene-væske kommer i kontakt med øynene eller huden.

Lagring: Lagres ved romtemperatur, 15-30 °C (59-86 °F).

Forklaring av etiketten

Se pakningsveiledning.

Medisinsk in vitro-utstyr


CE-merking

Advarsel: Lite, lokk - fare for kvæling

Ta spyttprøven innen

PORTUGUÊS

Kit de Auto-Recolha de ADN Oragene®
Instruções do Utilizador

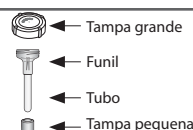

Instruções:

Não coma, beba, fume ou mastigue pastilha elástica na meia-hora anterior à recolha de saliva.

- 1 Cuspa até que a quantidade de saliva (e não espuma) chegue ao nível apresentado na imagem 1.
- 2 Mantenha o recipiente na vertical. Feche o funil com a tampa grande. Depois de fechada, o líquido que se encontra na tampa grande é libertado para se misturar com a saliva.
- 3 Mantenha o recipiente na vertical. Desaparafuse o funil do tubo (rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).
- 4 Feche o tubo com a tampa pequena.
- 5 Agite 5 vezes. Elimine o funil e a tampa grande.

Sugestões:

- NÃO retire a película de plástico da tampa grande.
- Para produzir mais saliva, com a boca fechada, agite a língua ou esfregue as bochechas.
- Algumas pessoas acham difícil cuspir muita saliva. É mais fácil cuspir mais quantidade se colocar ¼ de uma colher de sobremesa de açúcar na boca.
- Acabe de cuspir num período de 30 minutos.

Utilização: Este produto foi concebido para recolher, em segurança, amostras de ADN através da saliva humana.

Conteúdo: Cada frasco de recolha contém 2ml de líquido Oragene. Antes de utilizar, a solução na tampa deve estar transparente e incolor.

Advertências: Não ingerir. Se o líquido Oragene entrar em contacto com a pele ou com os olhos, lave com água.

Armazenamento: Armazene à temperatura ambiente de 15-30 °C.

Legenda da Etiqueta

Consulte a literatura inclusa da embalagem

Dispositivo Médico In Vitro

Marca CE

Atenção: Tampa pequena :perigo de sufocamento

Para recolha de saliva

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγίες Χρήσης για το κιτ ατομικής
συλλογής δειγμάτων DNA Oragene®



Οδηγίες χρήσης:

Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε και μη μασάτε τσιγάρα για 30 λεπτά προτού δώσετε δείγμα από το σάλιο σας.

- 1 Φτύνετε έως ότου η ποσότητα του υγρού σάλιου (χωρίς τον αφρό) φτάσει στη στάθμη που υποδεικνύεται στην εικόνα 1.
- 2 Κρατήστε τον περιέκτη σε όρθια θέση. Κλείστε τη χοάνη με το μεγάλο πώμα. Μετά το κλείσιμο, το υγρό που περιέχεται στο μεγάλο πώμα θα απελευθερωθεί ώστε να αναμιχθεί με το σάλιο.
- 3 Κρατήστε τον περιέκτη σε όρθια θέση. Ξεβιδώστε τη χοάνη από το σωληνάριο (περιστρέφοντας τη αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού).
- 4 Κλείστε το σωληνάριο με το μικρό πώμα.
- 5 Ανακινήστε 5 φορές. Απορρίψτε τη χοάνη και το μεγάλο πώμα.

Οδηγίες Χρήσης:

- ΜΗΝ αφαιρέσετε την πλαστική μεμβράνη από το μεγάλο πώμα.
- Για την παραγωγή επιπλέον ποσότητας σάλιου, κινήστε τη γλώσσα σας ή τρίψτε απαλά τα μάγουλά σας, κρατώντας το στόμα σας κλειστό.
- Ορισμένα άτομα ίσως δυσκολευτούν να τοποθετήσουν επαρκή ποσότητα σάλιου. Είναι πιο εύκολο να φτύσετε μεγαλύτερη ποσότητα, εάν τοποθετήσετε επάνω στη γλώσσα σας ¼ του κουταλιού του γλυκού απλή λευκή ζάχαρη.
- Ολοκληρώστε τη διαδικασία τοποθέτησης σάλιου εντός 30 λεπτών.

Προοριζόμενη χρήση: Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για την ασφαλή συλλογή δειγμάτων DNA μέσω του ανθρώπινου σάλιου.

Περιεχόμενο: Κάθε φιαλίδιο συλλογής δειγμάτων περιέχει 2 ml υγρού Oragene. Πριν της χρήσης, το δειγμάτωμα που εμπεριέχεται μέσα στο πώμα θα πρέπει να είναι διαφανές και άχρωμο.

Προειδοποιήσεις: Μην το καταπίνετε. Αν το υγρό Oragene έρθει σε επαφή με το μάτι ή το δέρμα, ξεπλύνετε με νερό.

Φύλαξη: Φυλάξτε σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 15 και 30°C (59-86°F).

Υπόμνημα Ετικέτας

Διαβάστε το ένθετο της συσκευασίας.

Διαpositivo Médico In Vitro

Σημάση CE

Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού από το μικρό πώμα

Συλλέξτε το δείγμα σάλιου έως